

www.nevercold.at | www.nevercold.de

NECO

WARMING PADS

**GEBRAUCHSANLEITUNG
MANUAL**

**DE
EN**

GEBRAUCHSANLEITUNG MANUAL

Das **NECO** Wärmekissen ist die punktuelle Wärmetherapie in allen Lebenslagen. Es ist immer dabei, immer griff- und anwendungsbereit. **NECO** bietet eigenständig eine wohltuende Wärmeanwendung zur Entspannung der Muskulatur, Förderung des Stoffwechsels und Schmerzreduktion.

Ärzte und Therapeuten nutzen **NECO** komplementär zu ihren Behandlungen um einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen.



Sofortige Wärme



**Wird durch
Luftkontakt
aktiviert**



**Sofort
einsatzbereit**



Geruchlos



Einwegartikel

1

1 Stück

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Wärmekissens alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig durch.

ANLEITUNG

- Öffnen Sie zuerst die Umverpackung und entnehmen Sie das Wärmekissen. **NECO** entwickelt seine therapeutische Wärme in ca. 15-30 Minuten.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch oder verwenden Sie es über der Kleidung, falls sich das Wärmekissen unangenehm erhitzt.
- **NECO** bleibt bis zu 16 Stunden warm. Äußere Faktoren (z. B. extreme Witterung oder direkte Sonneneinstrahlung) können jedoch zu einer Verkürzung der Nutzungszeit führen.



VORSICHT:

**KANN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN.
ÜBERPRÜFEN SIE IHRE HAUT REGELMÄSSIG
WÄHREND DES GEBRAUCHS.**

VERWENDEN SIE DAS PRODUKT NICHT

- Beim Schlafen.
- Zusammen mit Schmerzgel, medizinischen Lotionen, Cremes oder Salben.
- Über einen längeren Zeitraum an derselben Stelle.
- Unter enganliegender Kleidung, die das Wärmekissen auf die Haut drückt. (Gefahr der Stauhitze)
- In Kombination mit anderen Heizgeräten oder während einer MRT (Magnetresonanztomographie). Nicht in der Mikrowelle erhitzen.
- Wenn der Inhalt des **NECOs** ausläuft und/oder die Umverpackung beschädigt oder zerrissen ist.



WARNHINWEISE



Nicht empfohlen bei Säuglingen und Kleinkindern sowie Personen, die keine Hitze spüren können, mit empfindlicher Haut, Narben, offenen Wunden, Diabetes, Kreislauf- oder Gefäßerkrankungen. Besonders vorsichtige Verwendung bei Kindern, älteren Menschen sowie Menschen mit körperlicher Behinderung. Im Zweifelsfall einen Arzt aufsuchen.

NUR ZUR ÄUSSERLICHEN ANWENDUNG.

Das Wärmekissen nicht in den Mund nehmen. Bei Verschlucken des Inhalts, Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Den Inhalt bei Kontakt mit Augen oder Haut nicht verreiben. Vorsichtig mit Wasser aus-/abwaschen und einen Arzt aufsuchen.

LAGERUNG:

An einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

INHALTSSTOFFE:

Eisenpulver, Wasser, Aktivkohle, Salz, Vermiculit und Polymer.

ENTSORGUNG:

Im regulären Hausmüll

MAXIMALE TEMPERATUR:

70°C (158°F). Durchschnittstemperatur: 60°C (140°F). N

NECO STRAPS MAXI BLACK/WHITE


Die **NECO STRAPS** sind eine nachhaltige Möglichkeit um das **NECO** Wärmekissen, stationär und mobil, punktuell einzusetzen. Sie bestehen aus hautfreundlichem Baumwoll-Stretch und bieten mit ihrem Klettverschlussystem einen weiten Einsatzbereich, um das **NECO** Wärmekissen am Körper zu positionieren. So ist die therapeutische Wärmewirkung im Alltag immer gegeben und lässt sich leicht regulieren

VERWENDUNG DES NECO STRAPS MIT DEM NECO WÄRMEKISSEN:


- Öffnen Sie zuerst die Umverpackung und entnehmen Sie das Wärmekissen. **NECO** entwickelt seine therapeutische Wärme in ca. 15-30 Minuten.
- Platzieren Sie das **NECO** Wärmekissen in die vorgesehene Tasche des **NECO STRAP**.
- Legen Sie den **NECO STRAP** so an, dass die gewünschte Stelle mit Wärme versorgt wird.
- Unterbrechen Sie den Gebrauch oder verändern Sie die Position des Kissens mit dem **NECO STRAP**, wenn sich das Wärmekissen unangenehm erhitzt.

neco STRAP


ANWENDUNG

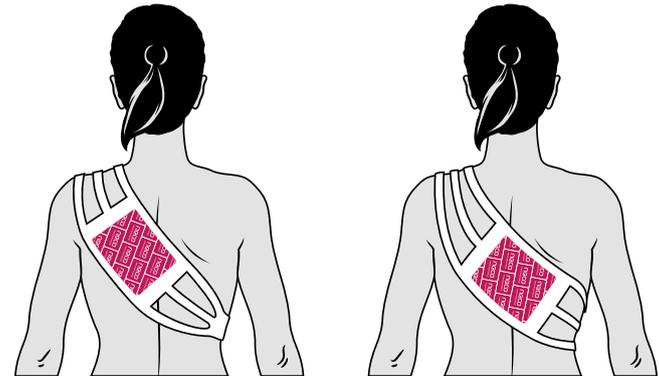

BEI KOPF, NACKEN- UND SCHULTERSCHMERZEN

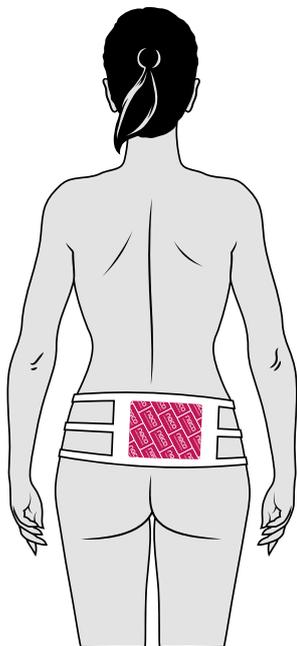

**BEI RÜCKSCHMERZ
(LWS SYNDROM)**

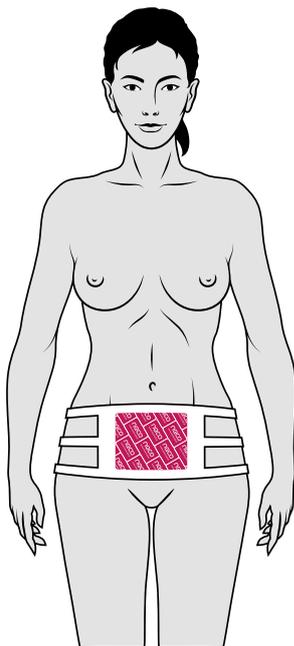

**BEI MENSTRUATIONS-
BESCHWERDEN**



VORTEILE

Da auf diese Weise das **NECO** Wärmekissen fest anliegt, können Sie damit auch Sport betreiben und Ihrem Alltag aktiv nachgehen.

Das Verlängerungselement bietet eine zusätzliche Möglichkeit für die individuelle Nutzung des **NECO STRAPS**.

Der **NECO STRAP** ist, wie auch das Verlängerungselement, wiederverwendbar und einfach im Woll- oder Feinwaschgang der Waschmaschine zu waschen.

WARNHINWEISE



Die Warnhinweise des **NECO** Wärmekissens gelten auch bei der Verwendung mit dem **NECO STRAP**!

NEVER COLD



Sofort
einsatzbereit
Ready to use



Einwegartikel
Disposable



Wird durch
Luftkontakt
aktiviert
Air activated



Sofortige Wärme
Instant Heat



Geruchlos
Odorless



WÄRME FÜR BIS ZU 16 STUNDEN
UP TO 16 HOURS

NECO MANUAL

The **NECO** warming pads are the punctual heat therapy for everyday usage. It is always at hand and ready to use.

NECO offers independent beneficial heat treatment for muscle relaxation, advanced metabolism and pain reduction.

Doctors and therapists use the **NECO** complementary to their treatment to achieve better results.



Instant Heat



Air activated



Ready to use



Odorless



Disposable

1

1 Piece

Please read all instructions and warnings carefully before use.

INSTRUCTIONS

- Tear open outer wrapper only when ready to use. **NECO** develops its therapeutical warmth in between 15 to 30 Minutes.
- If the product feels uncomfortably hot, stop use or wear it over clothing.
- **NECO** will stay warm for up to 16 hours. However it can be shortend depending on storage conditions or when using external exposure.



ATTENTION:

THIS PRODUCT CAN CAUSE BURNS.

CHECK SKIN FREQUENTLY DURING USE.

DO NOT USE

- While sleeping.
- With pain rubs, medicated lotions, creams or ointments.
- On the same place for an extended period of time.
- In tight fitting apparel that presses NECO against the skin.
- With other heating devices or during a MRI (magnetic resonance imaging). Do not heat it in a microwave.
- If NECO contents leak and/or the wrapper is damaged or torn.



WARNINGS



Not recommended for infants and children as people who cannot feel heat or have a sensitive skin, diabetes, scars, open wounds, circulatory or vascular disorders. Extra precaution for children, elderly or physically challenged people. If in doubt, consult a doctor.

FOR EXTERNAL USE ONLY.

Do not put the warming pad in your mouth. In case of ingestion, rinse mouth with water and consult a doctor. If contents come into contact with eyes or on skin, do not scratch. Wash with water and consult a doctor.

STORAGE:

Store in a cool place away from direct sunlight. Keep out of reach of children and pets.

CONTENTS:

Iron powder, water, activated charcoal, salt, vermiculite and polymer.

DISPOSAL

Discard with regular household trash.

HIGHEST TEMPERATURE:

158°F (70°C). Average Temperature: 140°F (60°C).

THE NECO STRAPS MAXI BLACK/WHITE


The **NECO STRAPS** are a consistent opportunity to use the **NECO** warming pads punctual in stationary or mobile conditions. They consist of skin-friendly cotton-strech and offer with their velcro fastener system a wide area of application to position the **NECO** warming pad at the body. This way the therapeutical heateffect is easy to use and regulate in everyday conditions.

USAGE OF THE NECO STRAP IN COMBINATION WITH THE NECO WARMING PADS:


- Tear open outer wrapper when ready to use. **NECO** develops its therapeutical warmth in between 15 to 30 Minutes.
- Put the **NECO** warming pad into the intended bag of the **NECO STRAP**.
- Apply the **NECO STRAP** so that the required part of the body get provided with heat.
- If the product feels uncomfortably hot, stop use or change the position of the pouch with the **NECO STRAP**.

neco STRAP


USAGE

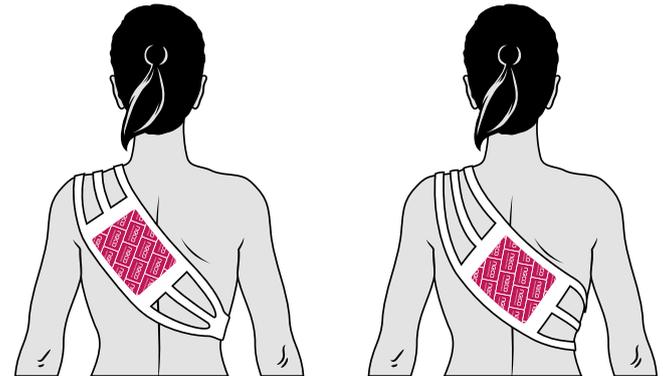

**FOR THE HEAD, NECK AND
SHOULDER PAIN**

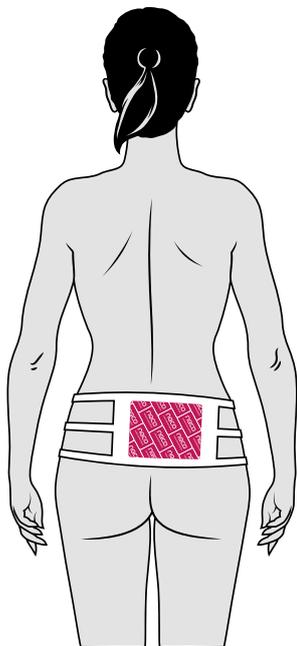

**FOR BACK PAIN
(LWS SYNDROME)**

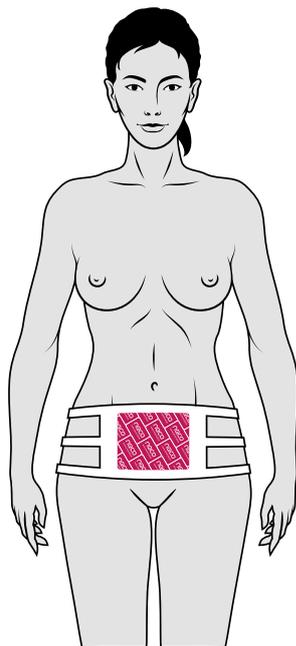

**FOR MENSTRUATIONAL
COMPLAINTS**



BENEFITS

When the **NECO** warming pad is used with the **NECO STRAP** it fits tightly to the body so you can use it during sports or an active everyday life.

The extension element offers an additional option for the individual usage of the **NECO STRAP**.

The **NECO STRAP** is, like the extension element, reusable and easy to wash in the washing machine by wool- or fine wash cycle.

WARNINGS



The warnings of the **NECO** warmingpads also apply when it's used with the **NECO STRAP**!

NECO

WARMING PADS

 **VERTRIEB ÖSTERREICH**

Stephan Kraus Produktvertrieb e.U.

info@nevercold.at

www.nevercold.at

 **VERTRIEB DEUTSCHLAND**

Gisela Kraus GmbH

info@nevercold.de

www.nevercold.de